

Használati utasítás

Levegő kompressziós terápias berendezés
Modell: 3-kamrás nyirokmasszázs készülék



Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatra.



RoHS
Made in China



I Tartalom

Biztonsági óvintézkedések	1
Gyakran ismételt kérdések	2-3
Komponensek nevei	3-4
Hibaelhárítás	4
Használja a	4-6
címet.	6
Megjegyzések használat	6
után Tisztítás és tárolás	7
Eltávolítás	7
A csomag tartalma	7
-- Műszaki adatok	7

I Óvintézkedések

Riasztások

1. Az alábbi állapotok bármelyikében szenvedő vagy kezelés alatt álló személyeknek a készülék használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal:

1) Pacemaker vagy más, elektromos interferenciára érzékeny orvosi eszközök használata;

2) Fájdalom rosszindulatú daganatokban;

3) Fájdalom a szívbetegségekben;

4) Súlyos perifériás neuropátia vagy érzékelési zavar cukorbetegség miatt;

5) Alkalmatlanság a masszázsra a test sérülése miatt;

2. Csecsemők, gyermekek és önálló használatra nem képes személyek elől elzárva tartandó.

3. Ne használjon az eredetitől eltérő hálózati adaptert.


4. Ne karcolja meg, ne sértse meg, ne hajlítsa, ne húzza és ne csavarja meg túlzottan a hálózati adapter tápkábelét. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés keletkezhet.

5. Tilos használni, ha a hálózati adapter nem működik megfelelően, vagy a csatlakozó meglazult.

6. Ne csatlakoztassa vagy válassza le a hálózati adaptert nedves kézzel.

7. Ne tegye a vezérlőt takaróba, és ne használja a készüléket magas hőmérsékleten.

8. Tilos a készüléket engedély nélkül átépíteni, szétszerelni vagy javítani.

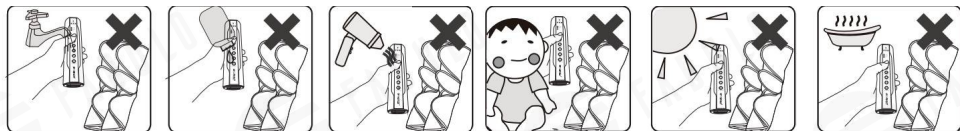

Riasztások

1. Ha nem érzi jól magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát. Ne használja újra, mielőtt orvoshoz fordulna.

2. Ne használja a fürdőszobában vagy más nedves helyen.

3. Tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.

4. Húzza ki a hálózati adaptert, ha nem használja.

5. Ne járkaljon, amikor ezt a készüléket használja, illetve ne viseljen csomagolást.

I Gyakran ismételt kérdések


1. kérdés: Hogyan masszíroz ez a termék?

V: 3+3 légszák van benne. Ezek felfújódnak és leereszkenek, hogy szimulálják a szövetek masszírozását és simogatását, mint az emberi kéz. Ez ellazíthatja az izmunkat, javíthatja a vérkeringést és enyhítheti a fájdalmat.

2. kérdés: Hány masszázsmóddal rendelkezik a készülék, és mi a különbség köztük? V: 3 masszázsmód létezik,

1. üzemmód: Szekvenciális üzemmód


Ebben az üzemmódban az ujjak alulról felfelé fújódnak és leereszkenek.

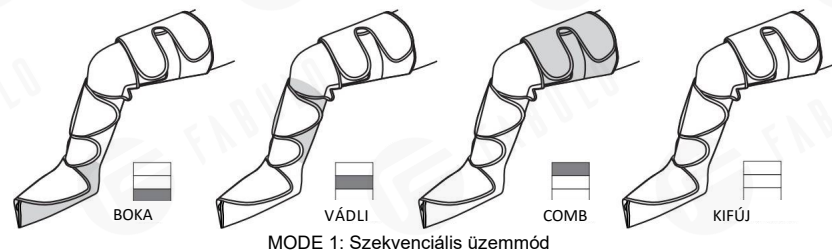

MODE 1: Szekvenciális üzemmód

2. üzemmód: keringtetési üzemmód,


Ebben az üzemmódban az ujjak alulról felfelé fújódnak és leereszkenek.

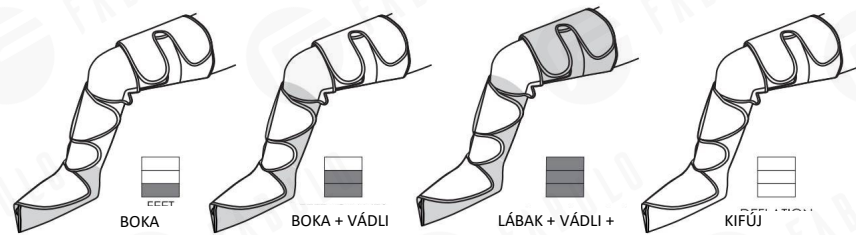

MODE 2 Mindkét üzemmód

3. mód: Minden mód,

Ebben az üzemmódban az ujjak egyszerre és teljesen felfújódnak és leereszkenek.

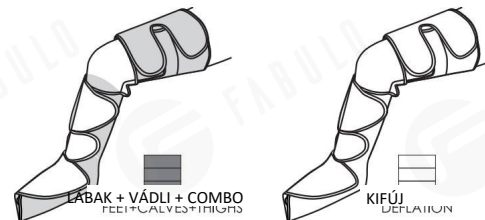


MODE 3: Keringési mód

3. kérdés: Mit tegyek, ha úgy érzem, hogy a masszázs ereje túl gyenge vagy túl erős?

A 3: A vezérlővel 3 masszázserősségi szint választható, válassza ki az Önnek megfelelő intenzitást. Az erősséget a tekercesk tépőzárjának feszességének változtatásával is beállíthatja.

4. kérdés: Mit tegyek, ha nagyobb a vádlím? V 4: Nagyobb vádli esetén használja a mellékelt tartozékokat a tekercsek méretének bővítéséhez.

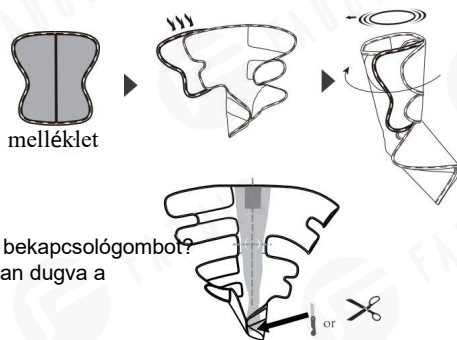

5. kérdés: Mit tegyek, ha nagyobb a lábam? 5. kérdés: Nagyobb lábak esetén vágja le a varratokat a lábujjak tetejénél.

6. kérdés: Miért nem működik, amikor megnyomom a bekapcsológombot?

A.6: Győződjön meg róla, hogy mindkét légtömítő be van dugva a illesztőprogramot, különben nem fog működni.

Q.7: Mennyi ideig kell használni?

A.7: Javasoljuk, hogy naponta 1-2 alkalommal 20 percig használja. Hosszú távon is használhatja, ha túl fáradtnak érzi magát, vagy továbbra is élvezni szeretné.


8. kérdés: Miért melegszik fel a meghajtó?

A.8: Ahogy mondtam, minden alkalommal 20 percig használhatja. Ha túl sokáig fut, a vezérlő felmelegszik, ez normális jelenség.

9. kérdés: Miért ad ki hangot a vezető?

A.9: A hang a vezetőben lévő, működő légpumpától származik, amely folyamatosan levegőt látja el a légszakokat a csomagterében, ez normális jelenség.

Termék el nézet

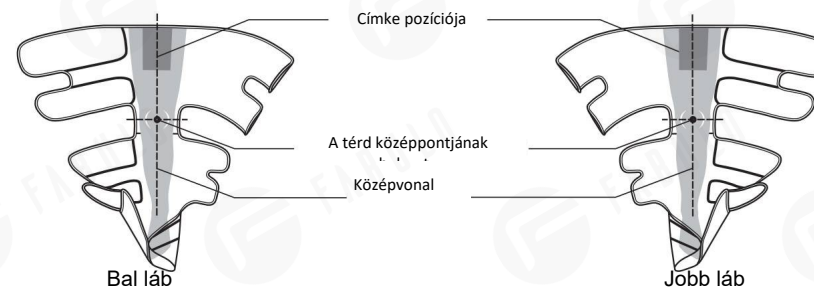


I Hibaelhárítás

Problémák	Okok és megoldások
1. A készülék nem működik, és a jelzőfény nem világít	Győződjön meg róla, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakoztatva van, és nyomja meg a vezérlő bekapcsológombját
2. A készülék nem működik, de a jelzőfény világít.	1. Csak akkor működik, ha 2 levegő van csatlakoztatva a vezérlőhöz-tömleők. 2. Ellenőrizze, hogy a légtömleők megfelelően vannak-e behelyezve (lásd "UP" jelét)
3. Működés közben leáll	1. A hálózati adapter vagy a légtömleők leesnek; 2. A masszírozó 20 perc után automatikusan kikapcsol; 3. Ellenőrizze, hogy mindkét légtömleő teljesen el van-e zárva.
4. Túl gyenge vagy túl erős	1. A masszázs három szintje közül választhat; 2. A tekercs szélességét a megfelelő erősségre állíthatja be; 3. Ha nem bírja elviselni az ilyen erőhatást, kapcsolja ki a készüléket.
5. A vezérlő felmelegszik.	Normális, hogy a vezérlő hosszabb használat után felmelegszik. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki 10 percre.

Alkalmazás:


Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket. A jobb masszázs elérésé érdekében viselje helyesen az ujjakat.

Használja a bal oldali tekercselést, mint az alábbi példában:

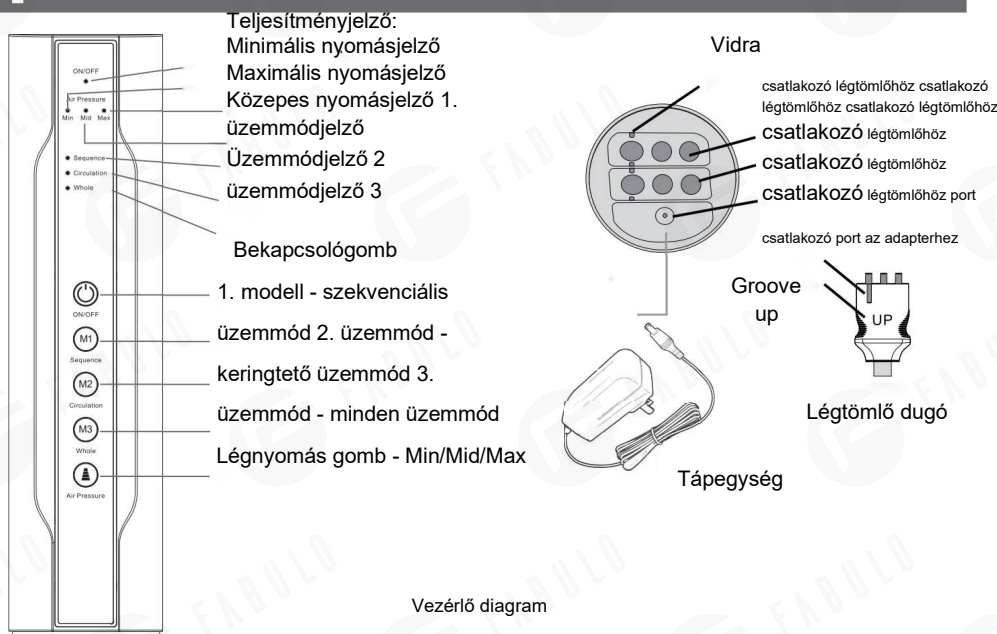


Vezérlő diagram

1. Ellenőrizze a címke szerinti irányt, és helyezze fel a pakolásokat helyesen a lábára.

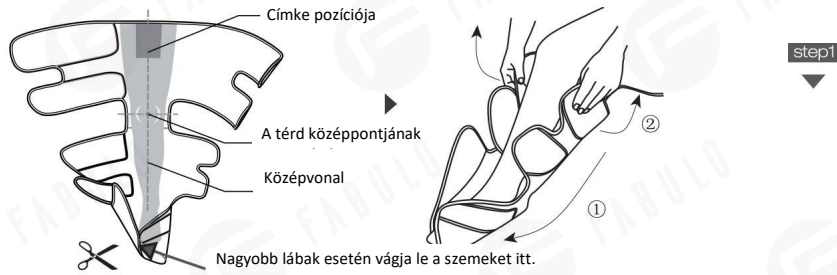

Rögzítse az összes tépőzárat a méretek megfelelően. Nagyobb vádlihoz használja a hosszabbítókat.

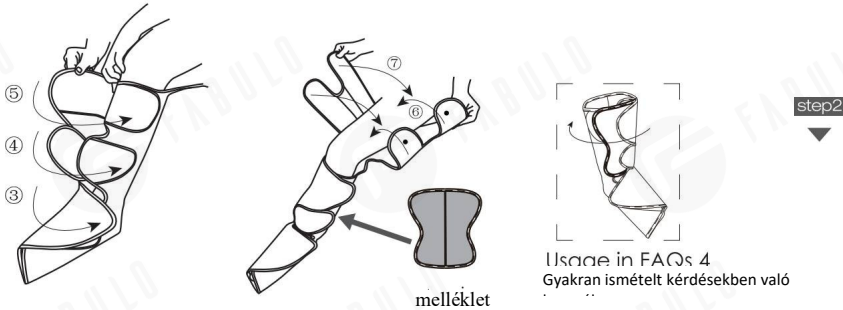


3. Ellenőrizze és állítsa be a helyzetet és a szorosságot az alábbiak szerint, ne csomagolja túl szorosan.



4. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a vezérlőhöz és a kétoldali aljzathoz.



5. Helyesen és teljesen helyezze be a két tömlődugót a működtetőbe.

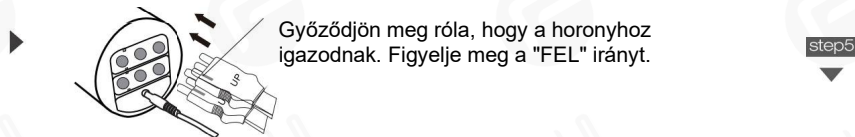

⚠️ Fiavelmeztetés


Javasoljuk, hogy a készülék mindig legfeljebb 20 percig legyen üzemben. A 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol, de újraindíthatja.

6. Vegye fel a távirányítót, és nyomja meg a "ON/OFF" gombot a készülék bekapcsolásához.

- Alapértelmezés szerint az 1. üzemmóddal és az 1. erősséggel (legalacsonyabb) indul.
- 20 perc elteltével leáll (manuálisan újraindíthatja).



7. Válassza ki a különböző masszázsmódokat az "M1"/"M2"/"M3" gomb megnyomásával, a 3 mód közötti különbség a 2. oldalon látható.

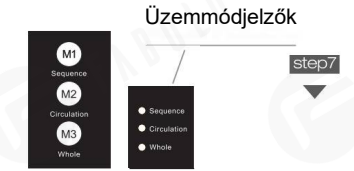

8. Nyomja meg a "Air Pressure" gombot az intenzitás kiválasztásához.

- 1) Három nyomásszint közül választhat. Javasoljuk, hogy kezdetben a legalacsonyabb fokozatot használja.
- 2) A tekercs szorosságát úgy állíthatja be, hogy az megfelelő erősségű legyen;



9. Nyomja meg a "ON/OFF" gombot a kikapcsoláshoz.



| Megjegyzések használat után

1. Húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból.



2. Húzza ki a hálózati adapter dugóit és a légtömlőket a vezérlő aljából.



3. Vegye le a csomagolást, és hajtsa őket egy tárolószámba vagy dobozba.



| Tisztítás

Ne felejtse el kikapcsolni a készüléket, amikor tisztítja a készüléket.

1. Szennyeződés esetén törölje le a működtetőszerkezetet, a csomagolást és a tömlőket szappanoldattal nedvesített puha ruhával.
2. Ne használjon benzint, alkoholt, hígítót vagy más irritáló folyadékot a készülék letörléséhez, különben meghibásodást okoz, vagy az alkatrészek megsérülnek vagy elszíneződnek.
3. Ne engedje, hogy idegen tárgyak kerüljenek a tömlőkbe.
4. Fogpiszkálóval eltávolíthatók a tépőzárakhoz rögzített szőrszálak vagy nyesedékek.

I Tárolás

- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Ne szerelje szét ezt a terméket saját maga.
- Ne helyezze magas hőmérsékletű és páratartalmú környezetbe.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Kerülje a légszákok és tömlők tűkkel történő átszúrását.
- Ne tegyen rá nehéz dolgokat.




I Eltávolítás

A hulladékok ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

I A csomag tartalma:

- 2 x láb- és lábtakaró
- 1 x kézi vezérlő
- 1 x felhasználói kézikönyv.
- 1 x hordozható tárolótáska
- 2 x hosszabbítás
- 1 x hálózati adapter / DC12V1A

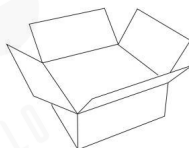

I Műszaki adatok:

Modell	3-kamrás nyirokmasszázs készülék
Név	Légkompressziós terápias berendezés
AC/DC adapter	AC bemenet: 100-240 Volt, AC 50/60Hz, DC kimenet: 12V 1A
Névleges teljesítmény	12W
Működési feltételek	Hőmérséklet: +5°C és 40°C között (41°F és 104°F között) Páratartalom: 1% és 90% között nem kondenzálódó légnyomás: 70 kPa és 106 kPa között
Tárolási feltételek	Hőmérséklet: -20°C és 55°C között Páratartalom: 5% és 90% között nem kondenzálódó légköri nyomás: 50 kPa és 106 kPa között Tartsa szárazon, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
Időzítés	20 perc