

6-kamrás nyirokmasszázs készülék

Fabulo Air 6



Felhasználói kézikönyv

I Felhasználói kör

Ezt a készüléket felnőttek általi használatra szánják.

I Rendeltetészer felhasználó

A létesítmény rendeltetészerű HASZNÁLÓJA a BETEG. Alkalmazott rész.

I Használati javallatok/rendeltetészer használat

A légkompressziós terápiás berendezés a kisebb izomfájdalmak átmeneti enyhítésére és a kezelt területek vérkeringésének átmeneti fokozására javallott jó egészségi állapotban lévő embereknél. A légkompressziós terápiás készülék a szövetek masszírozását és simogatását szimulálja egy felfújható ruhadarab segítségével.

I Ellenjavallatok

Ne használja ezt a terméket, ha az alkalmazás helyén vagy annak közelében gyulladás, fertőzés, ismeretlen eredetű fájdalom, vérzés (belső vagy külső) van, vagy ha az alkalmazás helyén vagy annak közelében seb van.

Ne használja ezt a terméket, ha orvos felügyelete alatt áll, vagy ha olyan állapota van, amely orvosi eszköz használatát igényli.

Ne használja ezt a terméket érzékeny bőrön.

Ne használja ezt a terméket, ha az alábbi állapotok bármelyike fennáll:

- Akut tüdőödéma
- Akut tromboflebitisz
- Akut pangásos szívelégtelenség
- Akut fertőzések
- Mélyvénás trombózis (DVT)
- Tüdőembólia epizódjai
- Sebek, elváltozások vagy daganatok az alkalmazás helyén vagy annak közelében
- Ahol a fokozott vénás és nyirokviszavezetés nem kívánatos
- A csontok törése vagy ficama az alkalmazás helyén vagy annak közelében.
- Arteriális elégtelenség jelenléte

I Mellékhatás

Ha a légnyomás túl magas, kellemetlen érzés lehet.

I Biztonsági intézkedések















Fontos, hogy elolvassa a jelen kézikönyvben található összes figyelmeztetést és óvintézkedést, mivel ezek célja az Ön biztonságának garantálása, a sérülések megelőzése és olyan helyzetek elkerülése, amelyek a berendezés károsodásához vezethetnek.







Forduljon orvoshoz, ha a felhasználó:

- Tüdőödéma, szívbetegség, vénarák, magas vérnyomás, magas láz.
- Olyan személy, akinek bőrbetegsége van, mint például bőrgégés, bőrgyulladás, felfekvés, gennyes betegség, rosszindulatú daganat stb.

- Olyan személy, aki a kezelendő területen vagy annak közelében bőrműtéten (bőrátültetésen) esett át.
- Olyan személy, akinek érbetegsége van, mint például az artériák sorozatos megkeményedése vagy egyéb angina pectoris, szívroham stb.
- Vérrög jelenlétének gyanúja esetén.
- Fizikai deformitással vagy beágyazott szögekkel (műizület, gyöngyök, fém stb.) kezelt terület.
- Frissen van túl a visszérműtéten.
- Műtét utáni felépülés, terhes nők, gyermekek.
- Ha a készülék használata után fokozódik a fájdalom.

⚠ Riasztások

	Kérjük, a biztonság érdekében ne használja egyidejűleg más orvosi berendezésekkel és implantátumokkal, például pacemakerrel, műszívvvel stb. együtt. A túl magas vérnyomással vagy a vérkeringés elzáródásával rendelkező felhasználók szintén nem használhatják.		Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Továbbá ne nyomja meg asztallal vagy székekkel. Ez áramütést, elektromos szivárgást vagy tüzet okozhat.
	Amikor a tápkábelt csatlakoztatja vagy kihúzza a konnektorból, száraz kézzel húzza ki. Ellenkező esetben áramütést okozhat.		Amikor ezeket az ujjakat használja, viseljen valamit, hogy elkerülje a bőr és az ujjak közötti közvetlen érintkezést.
	Amikor ezeket az ujjakat használja, viseljen valamit, hogy elkerülje a bőr és az ujjak közötti közvetlen érintkezést.		Ne használja túl sok elektromágneses hullámmal terhelt környezetben. Ez a berendezés meghibásodását és a felhasználó sérülését okozhatja.
	Vigyázzon, hogy ne kerüljön víz vagy más anyag a készülékbe, ne merítse a készüléket vízbe.		Ne próbáljon meg járni vagy mozogni a készülék használatát közben.
	Ha hosszú ideje nem használta a készüléket, vagy ha hideg környezetben szeretné használni. Előfordulhat, hogy a készülék nem működik rendesen. Ebben az esetben három vagy négy használat után használja a készüléket különböző nyomással.		A készülék tisztításakor gondosan kövesse a jelen kézikönyvben ismertetett tisztítási utasításokat, ellenkező esetben a termék külső sérülései, például elszíneződések keletkezhetnek.
	A készüléket külön-külön csatlakoztassa a konnektorból, ne csatlakoztasson más készülékeket ugyanabba a konnektorból, hogy egyszerre használja őket, mert fennáll a tűz, áramütés vagy más sérülés veszélye.		Ha ez a berendezés meghibásodik vagy egyáltalán nem működik, ne próbálja meg kinyitni, megjavítani vagy szétszerelni a főegységet vagy ezt a berendezést, mivel fennáll a tűz, áramütés vagy a felhasználó sérülésének veszélye.
	Ha először használja ezt a készüléket, használja a legalacsonyabb beállításon, és lassan növelje a kezelési időt és a nyomást az Ön igényeinek és érzésének megfelelően. Ha hosszú ideig folyamatosan használja, akkor ellenkező hatást tapasztalhat.		A légtömítő nem csavarható vagy hajlítható meg.

	Ne használja ezt az eszközt, ha a kezelési hely közelében gyulladást, fertőzést, ismeretlen eredetű fájdalmat vagy (belső vagy külső) vérzést tapasztal.		Az ujjakat ne mossa mosógépben, és ne merítse vízbe. Tisztításuk során kövesse az ebben a kézikönyvben található utasításokat.
	Ha fájdalmat érez vagy kényelmetlenül érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát. Legyen óvatos az ujj rögzítésekkel, mivel a ruházat, a haj vagy a bőr beakadhat a cipzárból.		Ellenőrizze a készülék használatához megfelelő feszültséget. Ennek elmulasztása meghibásodást, áramütést, tüzet vagy sérülést okozhat.
	A masszázson kívül más céllra ne használja. Az áramütés vagy más sérülés veszélye miatt csecsemők és gyermekek előtt elzárva tartandó.		
	Ezt az eszközt nem tesztelték MR-környezetben való használatra, és nem szabad MR-környezetnek kitéve használni, amikor a betegek ezt az eszközt viselik. Tartsa az eszközt az MRI-berendezéssel ellátott helyiségen kívül. Használja az eszközt az orvos utasításai szerint vagy a használati utasításban foglaltaknak megfelelően.		

⚠ Riasztások

- Az ME-eszközöket nem szervizelik vagy karbantartják, amíg a betegek használják.
- Nem szabad a berendezésre ülni vagy rálépni, nem szabad a berendezést szorítani vagy szétszedni.
- A tartozékok cseréjekor ne feledje, hogy csak a gyártó eredeti alkatrészeit szabad használni.
- A hálózati dugó a hálózati hálózatról való leválasztás eszközeként szolgál. Ne helyezze a berendezést úgy, hogy a hálózati dugót nehéz legyen kihúzni a konnektorból.
- Kerülje el a hálózati kábel és a közös légtömítő okozta fojtogatást.
- Tartsa a berendezéseket háziállatok, kártevők vagy gyermekek elől elzárva, hogy elkerülje a véletlen megsemmisülést.
- A készüléket jól tárolja, hogy megakadályozza a szálak, a por és a napfény okozta gyorsabb öregedést.
- A hőmérséklet-érzékelő meghibásodása a köpeny túlmelegedéséhez vezet.
- A nyomásérzékelő meghibásodása a légnyomás növekedéséhez vezet.

FIGYELMEZTETÉS: Mikrohullámú sütő, nagyfrekvenciás sebészeti berendezés, mágneses rezonancia képalkotó vagy más rádiófrekvenciás sugárzás használata a termék közelében meghibásodást okozhat, vagy az alapszintű teljesítmény elvesztését eredményezheti, ami azt jelenti, hogy a mérési pontosság sérül.

FIGYELMEZTETÉS: Kerülje a készülék használatát más készülékek közelében vagy azokkal együtt, mivel ez helytelen működéshez vezethet. Ha az ilyen használat elkerülhetetlen, ezt a berendezést és a többi berendezést meg kell figyelni, hogy meggyőződjön arról, hogy normálisan működnek.

FIGYELMEZTETÉS: A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések (beleértve a perifériás eszközöket, mint például az antennakábeleket és a külső antennákat) nem használhatók a légkompressziós terápiás készülék bármely részének 30 cm-es (12 hüvelykes) távolságán belül, beleértve a gyártó által meghatározott kábeleket is. Ennek elmulasztása csökkentheti a készülék teljesítményét.

FIGYELMEZTETÉS: A berendezés gyártója által megadott vagy biztosított tartozékoktól, átalakítóktól és kábelektől eltérő tartozékok, átalakítók és kábelek használata megnövekedett elektromágneses kibocsátást vagy a berendezés elektromágneses immunitásának csökkenését eredményezheti, és helytelen működéshez vezethet.

A kábelek listája és a maximális kábelhossz a következők :

Kábel neve	Kábel hossza	Van-e árnyékolás
Hálózati kábel	1.8m	Nem

Figyelem!

Biztonsági, lopásgátló és rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök. Egyes elektromágneses lopásgátló rendszerek és fémdetektorok, például az áruházak, könyvtárak és más nyilvános helyek bejáratánál vagy kijáratánál használt rendszerek, valamint a repülőtéri biztonsági berendezések befolyásolhatják a légtömörítő berendezéseket. Ezenkívül az RFID-berendezések, amelyeket gyakran használnak azonosító címkék olvasására, valamint egyes címkékikapcsoló berendezések, például az áruházak fizetési pultjainál és a könyvtárak pénztárainál használtak, szintén hatással lehetnek a légkompressziós terápiás berendezésekre. Kérjük, ne használja a légkompressziós terápiás készüléket ezen helyek közelében. Ha át kell haladnia valamelyik ilyen létesítményen, kapcsolja ki a légkompressziós terápiás berendezést. Minden használat előtt ellenőrizze a légkompressziós terápiás készülék állapotát, hogy megbizonyosodjon a készülék rendeltetésszerű működéséről.

A rövidhullámú diatermia, mikrohullámú diatermia vagy terápiás ultrahang diatermia (mostanában mind diatermiának nevezik) és elektrokauter eszközök használata a termék közelében meghibásodást okozhat vagy az alapvető teljesítmény elvesztéséhez vezethet, kérjük, ne használja a légkompressziós terápiás készüléket ezen eszközök közelében. Minden egyes használat alkalmával figyelje meg a berendezést, hogy meggyőződjön arról, hogy az rendesen működik.

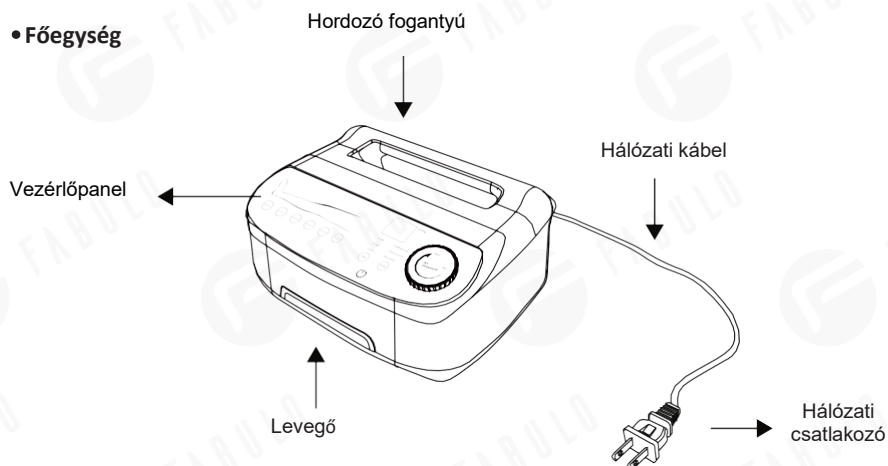
Ha használat közben erős fájdalmat, szokatlan tüneteket tapasztal, vagy ha vészhelyzetben enyhíteni szeretné a nyomást:

- Állítsa le a készüléket a készenléti gomb megnyomásával.
- Húzza ki a légtömítő csatlakozóját a főegységből vagy a lábmandzsettából.
- Vegye le a mandzsettákat a végtagokról.
- Szükség esetén azonnal forduljon orvosához.

I Termékleírás


A termék főként a főegységből, a lábmandzsettákból és a csuklós légtömítőkből stb. áll.

• Főegység




Č.	Név	Használat
1	Vezérlőpanel	Felhasználói felület a felhasználó számára a készülék működtetéséhez; kezelési információk megjelenítése.
2	Levegő kimenet	A tömlőcsatlakozó csatlakoztatására szolgál.
3	Hálózati csatlakozó	A váltóáramú csatlakozóaljzat csatlakoztatására szolgál.
4	Hálózati kábel	Az áramot a főegységhez vezető kábel
5	Hordozó fogantyú	Fogantyú, amely alkalmas a felhasználók számára a készülék mozgatására.

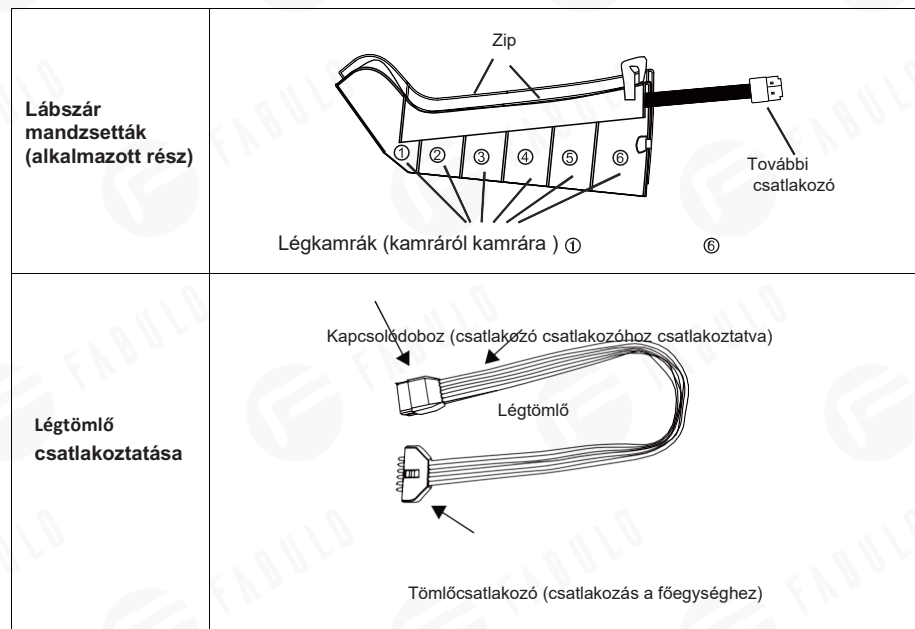• Tartozékok



Č.	Név	Használat
1	További csatlakozó	A légtömítőcsatlakozó dobozhoz való csatlakoztatásra szolgál
2	Zip	Használat előtt zárja be a cipzárat, hogy a mandzsetta a lábak köré tekeredjen.
3	Légkamrák	Az a rész, ahol a levegőt felfújják és leeresztik, 6 légkamra minden egyes lábszár mandzsettához.
4	Kapcsolódoboz	A lábszármandzsetta csatlakozójához való csatlakoztatásra szolgál.
5	Légtömítő	A tömlő, amely a levegőt a légkamrákba szállítja.
6	Tömlőcsatlakozó	A főegység légvivető nyílásához való csatlakoztatásra szolgál.

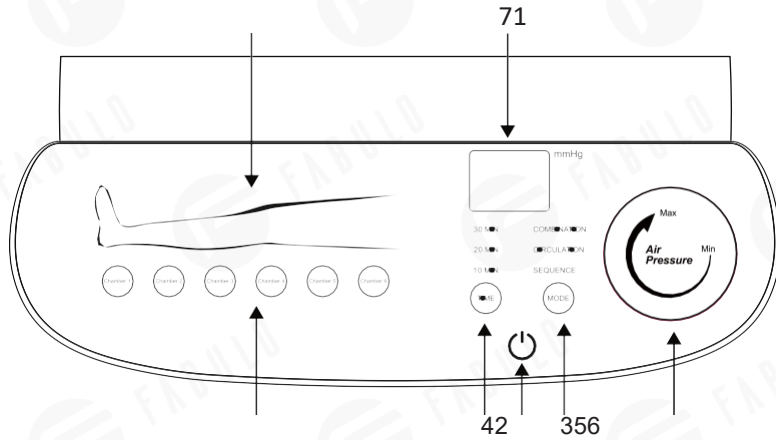• F egység vezérlő panel



Č.	Név	Használati utasítás
1	LED képernyő	<ul style="list-style-type: none"> Beállítási mód megjelenítése: a "Mode" gomb megnyomásakor a beállítási mód (P1 vagy P2 vagy P3) 2 másodpercre megjelenik; Nyomásérték kijelzés: 2 s az üzemmód gomb megnyomása után automatikusan átvált az aktuális légnyomás értékének (50~199 mmHg) kijelzésére.
2	Idő gomb	Válassza ki a masszázs időpontját: 10/20/30 perc választható. Minden időzítésnek saját kijelzője van (10 perc/20 perc/30 perc kijelző).
3	Készletléti állapot gomb	A főegység be/ki kapcsolása
4	1. kamrától a 6. kamráig gomb	Kezelési hely vezérlő gomb (1. kamra, 2. kamra, 3. kamra, 4. kamra, 5. kamra, 6. kamra gomb vezérli a megfelelő kezelési helyet a lábtól a combig).
5	Mód gomb	Mód kiválasztása.
6	Üzemmódjelzők	Összesen 3 kijelző (szekvenciális üzemmód, cirkulációs üzemmód, kombinált üzemmód)
7	Gombnyomás	A nyomásszint beállítása: balra fordulva a nyomás csökken, jobbra fordulva a nyomás nő.
7	A kezelési helyek rendszere	Hat két jelzés, amelyek a kezelés adott helyzetét jelzik.

• Általános felszerelési előírások

Termék neve:	Légkompressziós terápiás berendezés	Modell	Air 6
Méreték (főegység)	L258mm/W192mm/V119mm	Tömeg (minden tartozékkal együtt)	3.5KG
Nyomás tartomány	50~199mmHg	Teljesítmény	AC bemenet: 100~240 Volt 50/60HZ, 1.0A Max.
Energiafogyasztás	35w	Kamrák száma	6 kamra
Működési mód	Folyamatos működés	Mód	3 üzemmód

Elektromos áramütés ellen	Alkalmazott rész	Terápiás helyzet	Lábak, vádlik, térdek és combok
A kezelés időtartama	10/20/30 perc	Postaláda anyagok	ABS
Mandzsetta mérete	L1015mm* W 380MM		
Működési feltételek	Hőmérséklet : +5°C és 40°C között; légköri nyomás : 75 kPa és 106 kPa között; páratartalom : 5% és 90% között, nem kondenzálódik.		
Tárolási feltételek	Hőmérséklet : -20 °C-tól 55 °C-ig; légköri nyomás : 75 kPa-tól 106 kPa-ig; Páratartalom : 5% és 90% között, nem kondenzálódik. Tartsa szárazon és kerülje a közvetlen napfényt.		

Hogyan kell használni

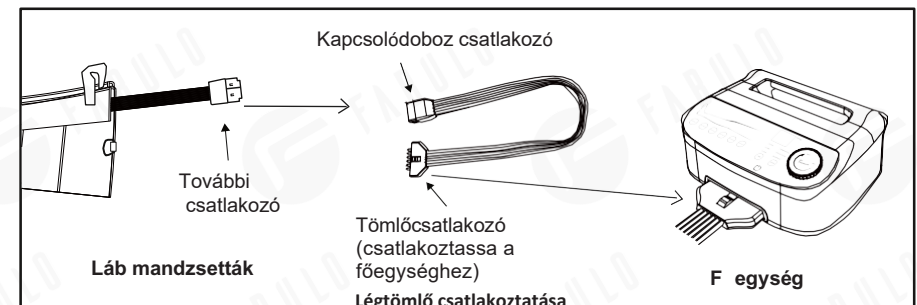
• A rendszer beállítása

1. lépés: Húzza le a cipzárat a mandzsettán, majd tegye bele az egész lábát, és jól tekerje körbe a cipzárat a lábán.

Az ujjak között nincs balra-jobbra különbség.



2. lépés: Csatlakoztassa a lábmandzsetta "csatlakozócsatlakozóját" a légtömlőcsatlakozó "csatlakozódoboz csatlakozójához"; majd csatlakoztassa a légtömlőcsatlakozó "tömlőcsatlakozóját" megfelelően a főegység "levegő kimenetéhez".
Megjegyzés: Az "Igen" hangot fog hallani, amikor teljesen bedugja a tömlőcsatlakozót a főegységbe.



3. lépés: Csatlakoztassa a főegység hálózati csatlakozóját a hálózati aljzathoz (tápegység).

4. lépés: A masszázs elindításához nyomja meg a főegységen a "Készenlét" gombot.


• A készülék szekvenciális üzemmóddal és 50 mmhg (legalacsonyabb) légnyomással, alapértelmezett 10 perces időzítéssel indul. Ha nincs időzítés kiválasztva, akkor 10 perc kezelés után automatikusan kikapcsol (- a készülék manuálisan újraindítható).

• Mód kiválasztása


Nyomja meg a "Mode" gombot a különböző masszázsmódok váltásához és élvezetéhez, a LED-képernyő megjeleníti a kiválasztott módot (szekvenciális mód: P1 kijelző, cirkulációs mód: P2 kijelző, kombinált mód: P3 kijelző), miután 2 másodpercig megnyomta a mód gombot, és a megfelelő LED-kijelző villogni fog.

A működés közbeni üzemmód beállítása nem okozza az időzítés újraindulását. Az egyes üzemmódok masszírozási sorrendje a következő:

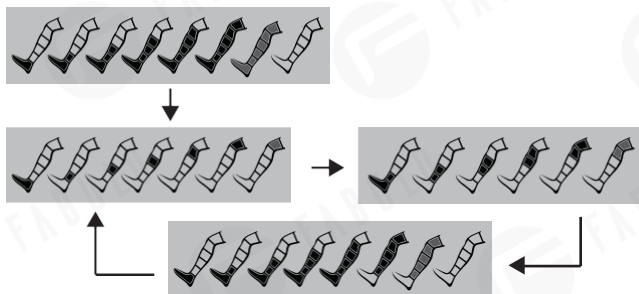
Mode1: Szekvenciális üzemmód



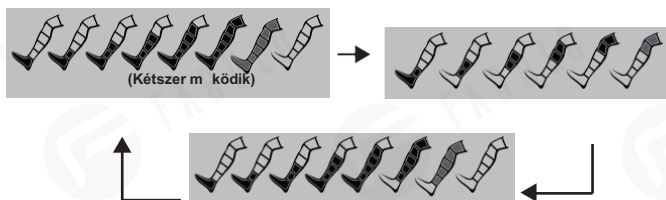2. üzemmód: keringtetési üzemmód



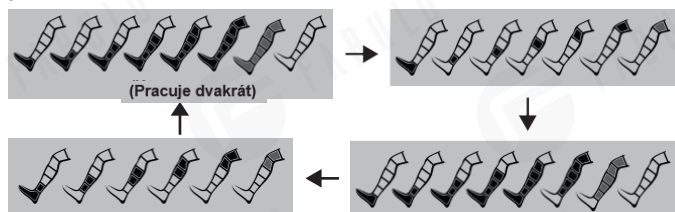3. üzemmód: Kombinált üzemmód



• Válassza ki a kezelési területet

Nyomja meg az "1. kamra", "2. kamra", "3. kamra", "4. kamra", "5. kamra" vagy "6. kamra" gombot a megfelelő kamrák masszírozásának leállításához vagy újraindításához.

A kijelző villogni fog, ha a hozzá tartozó kamra működik. Ha egy kamra nem működik, a kijelzője kiállszik;

A készülék bekapcsolásakor minden kamra alaphelyzetben működik, a főegység bekapcsolásakor minden kezelési terület kijelzője állandóan kék színnel világít;

A kezelés során a kezelt terület kiigazítása nem vezet az időzítés újbóli beindításához.

A kezelési terület módosítása nem szakítja meg az üzemmód szekvenciáját, a nem kiválasztott kezelési terület a munkafolyamat szekvenciájában kihagyásra kerül.

Megjegyzés: A főegység 1 perc után automatikusan kikapcsol, ha minden kamra ki van kapcsolva.

• Az intenzitás és az idő beállítása

Idő beállítás:

Nyomja meg az "Idő" gombot a működési időzítés kiválasztásához 10/20/30 perc közül, az alkalmazott időzítés LED-kijelzője folyamatosan kék fényt mutat. A működés közbeni beállítás után az időzítés újra nulláról kezdi a számlálást



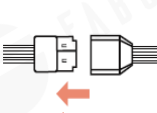
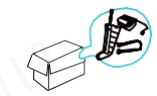
Intenzitás beállítás:

A nyomás intenzitásának beállításához forgassa el a nyomógombot. A légnyomás tartománya 50~199 mmhg. Ha balra forgatja, a nyomás csökken, a legalacsonyabb légnyomás 50 mmhg, ha jobbra forgatja, a nyomás nő, a legmagasabb légnyomás 199 mmhg (10 mmhg-rel növelhető vagy csökkenthető). Javasoljuk, hogy az első használathoz válassza a legalacsonyabb értéket, majd a későbbi használathoz állítsa be a személyes preferenciáinak megfelelően.

A nyomás intenzitásának beállítása a kezelés során nem eredményez újbóli időzítést.

• A kezelés befejezése

Prístroj sa po uplynutí doby ošetrenia automaticky vypne, alebo môžete liečbu kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla „Standby“.

	Ha befejezte a használatot, húzza ki a főegység dugóját a konnektorból. Megjegyzés: Amikor kihúzza a hálózati dugót vagy a csatlakozót, a dugónál fogva húzza ki, ne a kábelnél fogva.
	Távolítsa el a csatlakozót a főegységről.
	Távolítsa el a két további csatlakozót a csatlakozódobozból.
	Tartsa a főegységet és az összes alkatrészt a dobozban.

I A berendezés tisztítására vonatkozó utasítások

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSAKOR NE FELEJTSE EL KIKAPCSOLNI A KÉSZÜLÉKET.

A kezelés után törölje át a lábszár mandzsettájának belső és külső oldalát 3-szor tiszta, vízzel átitatott pamut puha ruhával, majd törölje át 3-szor 75%-os alkoholba áztatott tiszta pamut puha ruhával, minden alkalommal legalább 10 másodpercig; végül törölje át még 3-szor tiszta, vízzel átitatott pamut puha ruhával, hagyja természetesen megszáradni.

Figyelmeztetések:

- Ne használjon benzint, hígítót vagy más irritáló folyadékot a készülék letörléséhez, különben meghibásodást okoz, vagy az alkatrészek megsérülnek vagy elszíneződnek.
- Ne tegye ki a berendezést nedvességnek vagy nedvességnek. Ne tartsa a készüléket folyó víz alá, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Győződjön meg róla, hogy nem kerül víz a készülékbe. Ha ez mégis megtörténne, csak akkor használja újra a készüléket, ha az teljesen kiszáradt.
- Ne tisztítsa a készüléket kezelés közben, tisztításkor győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.

I Tárolás

A készüléket hűvös, jól szellőző helyen tárolja. Ha hosszabb ideig szeretné tárolni a készüléket, tegye az eredeti dobozába.

Ne tárolja a készüléket túl alacsony hőmérsékleten vagy nedves helyen, mert megfagyhat és károsodhat a funkció. Tartsa be a jelen kézikönyvben megadott tárolási feltételeket.

Tűzveszély miatt ne tárolja a ruhákat tűzhely, cigaretta vagy más hőforrás közelében. Ne tárolja a ruhaneműket tűk, ollók vagy más éles tárgyak közelében, mivel fennáll a ruhaneműk sérülésének veszélye.

Kerülje a közvetlen napfényt, és tartsa távol a készüléket a fűtőberendezéstől, beleértve a gáztűzhelyet is, a szennyeződés és a meghibásodás lehetősége miatt.

Ne tegyen rá nehéz dolgokat.

I Eltávolítás



A termék életciklusának végén ne dobja a terméket a normál háztartási hulladékba, hanem vigye el az elektronikai berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai potenciálisan káros hatással lehetnek a környezetre. A nem megfelelő ártalmatlanítás káros mérgeanyagok felhalmozódását okozhatja a levegőben, a vízben és a talajban, és károsíthatja az emberi egészséget, ezért a berendezéseket megfelelően kell ártalmatlanítani. Az EU országokban nyilvános gyűjtőhelyen kell ártalmatlanítani - 2002/96/EK WEEE irányelv. Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a kereskedőhöz.







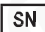









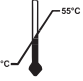
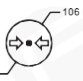



I Hibaelhárítás

Problémák	Okok és megoldások
1. Nem működik és a jelzőfény nem világít	1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva. 2. Kapcsolja be a főkapcsolót. 3. Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően működik-e (ellenőrizze a feszültséget) 4. Ellenőrizze, hogy a kezelés időzítése befejeződött-e. (Ha igen, indítsa újra a bekapcsológomb megnyomásával).
2. A mandzsetták nem fújódnak fel levegővel, vagy nincs nyomás.	1. Csak akkor működik, ha 2 légtömlő van csatlakoztatva a vezérlőhöz. 2. Ellenőrizze, hogy a tömlőcsatlakozók nincsenek-e megcsavarodva vagy nehéz tárgyakkal összenyomva. 3. Ellenőrizze, hogy minden csatlakozó vagy dugó csatlakozása helyes és stabil.
3. Ha úgy hangzik, mintha légszivárgás lenne.	1. Ellenőrizze, hogy a tömlőcsatlakozók teljesen és helyesen vannak-e behelyezve. 2. Ellenőrizze, hogy a tömlőcsatlakozók nincsenek-e összenyomva, elcsavarodva vagy meghajlítva. Ellenőrizze a tömlőcsatlakozókat sérülés szempontjából
4. A működés hirtelen megszakadása.	1. A tápkábel vagy a légtömlő kiesik; A készülék a kezelés befejezése után automatikusan kikapcsol.
5. A nyomás túl gyenge vagy túl erős.	1. Állítsa be a nyomógombot a megfelelő intenzitási szint kiválasztásához. 2. Kapcsolja ki a készüléket, ha nem tudja elviselni az erőt
6. A főegység felmelegszik	Normális, hogy a főegység túl sok használat után felmelegszik. Javasoljuk, hogy 10 percre kapcsolja ki.

I A csomag tartalma

2 x lábszár mandzsetta, cikkszám: Air 6-mandzsetta
 1 x csatlakozó légtömlő, cikkszám: Air 6-levegőcső
 1 x főegység, Air 6
 1 x felhasználói kézikönyv

I A szimbólumok leírása

	Általános figyelmeztető jel.		A terméket függőlegesen felfelé kell elhelyezni
	Alkalmazott alkatrész típusa BF		Limit 5 réteg
	A gyártás dátuma		Készenléti állapot gomb
	Sorszám		Az áramütés elleni védelem típusa: II. osztály
	Szárazon tárolni		Gyártói információk: A gyártó neve és címe
	Lásd a használati utasítást.		Tételkód
	Felakasztva száradni		Ne használjon vasalót
	Vegyszeres tisztítás nem megengedett.		Ne fehéritsen
	Felső hőmérsékleti határértékek (55 °C) és alsó határértékek (-20 °C), amelyeknek az orvostechnikai eszköz biztonságosan kitéhető.		
	Atmoszférikus nyomástartomány (felső határ: 75Kpa , Alsó határérték : 106Kpa), amelynek az orvostechnikai eszköz biztonságosan kitéhető.		
	Az a páratartalom-tartomány (felső határ: 90% RH , alsó határ: 5% RH), amelynek az orvostechnikai eszköz biztonságosan kitéhető.		
	A 2002/96/EK irányelvnek (WEEE) megfelelő ártalmatlanítás.		
	Ezt az eszközt nem tesztelték MR-környezetben való használatra, és nem szabad MR-környezetnek kitéve használni, amikor a betegek ezt az eszközt viselik. Tartsa az eszközt az MRI-berendezéssel ellátott helyiségen kívül.		